


Hotte chimique ETRAF

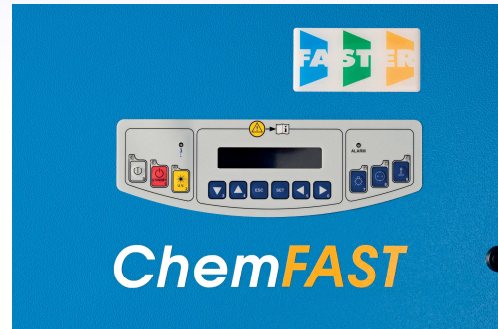


Accessoires (suite)

Les filtres ne sont pas inclus dans la hotte, il faut les choisir en fonction de l'imprégnation et de la taille de la hotte.

Plan de travail

- Plan de travail en inox
- Plan de travail en inox revêtu de Téflon

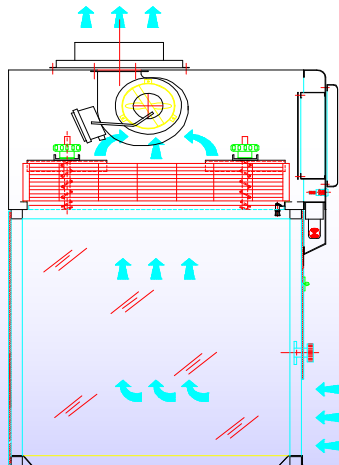

Avantages

- Filtres à grande capacité d'adsorption
- Parois latérales vitrées
- Cuvette de rétention amovible
- Conforme à la norme NF X 15211

Applications

Confinement de vapeurs toxiques et aérosols afin de protéger l'opérateur

Principe

L'air est aspiré dans le volume de travail à travers l'ouverture frontale, filtré en partie supérieure à travers un préfiltre puis le filtre charbon actif

Les hottes ChemFAST existent en 2 versions:

Modèle TOP : régulation par variateur électronique de vitesse

Modèle ELITE : régulation automatique de débit

Construction

Caisson supérieur en acier peint époxy.

Structure inférieure en aluminium anodisé.

Parois latérales en verre sécurit.

Autres équipements standards

Plan de travail en forme de cuvette amovible.

Eclairage par tube fluorescent monté hors du plan de travail

OPTIONS

Plan de travail

Plan de travail en inox.

Plan de travail en inox revêtu de Téflon.

Deuxième filtre de sécurité

Ajout d'un filtre Charbon actif ou HEPA supplémentaire à l'extraction

Accessoires

Filtres charbons actifs

Les filtres charbon actif existent avec différentes imprégnations afin d'adapter l'appareil aux produits manipulés